

《特長》

- ・特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています
- ・広範囲のサイズを取り揃えています

《材質》

- ・ブレード：ステンレス鋼

《仕様》



- ・ディスプレイ（単回使用）
- ・γ線滅菌済
- ・GS1-128バーコード
- ・10本/箱入

《適用》

- ・歯科

《定価》

- ・1箱 5,000円（税別）

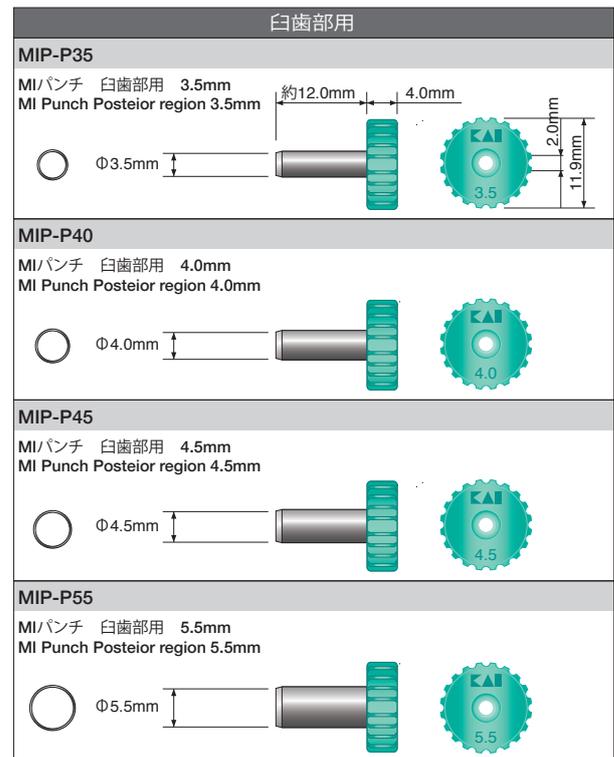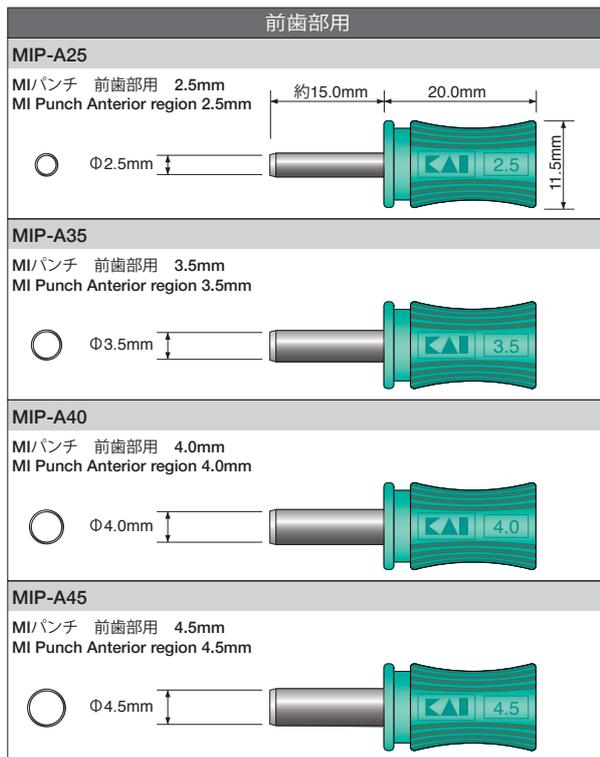

## MIパンチについて


MIパンチはより安全で、低侵襲（Minimal Intervention）なインプラント手術の為に開発された歯肉用パンチです。高い操作性を要求される口腔内での使用場所に応じて精密な治療ができるよう前歯部用と臼歯部用の2タイプを揃えました。

臼歯部用は刃の全長を臼歯の高さに合わせ、ハンドルも短くすることで狭い空間での操作性を向上させています。また、ハンドル上部にテーパ形状の穴を開けており、パンチを回転させる際に練成充填器を当てて安定させることが可能です。


前歯部用は刃の全長、ハンドルとも臼歯部用より長くしており、広いスペースでの使用に適した形状となっています。

操作性、使いやすさを追究したMIパンチが先生方の安全・低侵襲なインプラント手術のお役に立つことを願っております。


## 使用例

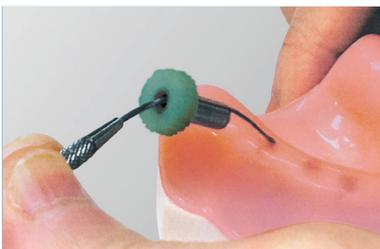


1. MIパンチを器具に通し、センターの位置を決めます。

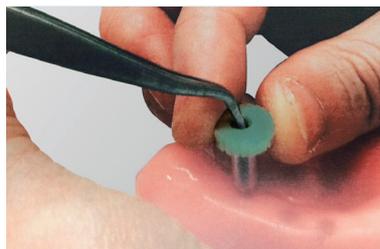

2. 器具を上部の穴に入れてMIパンチを押さえます。

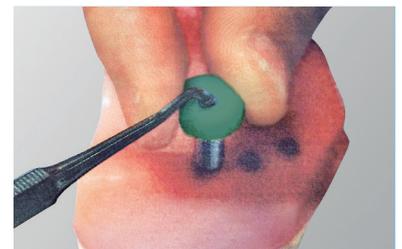

3. 器具で安定させながら、手で回して切ります。

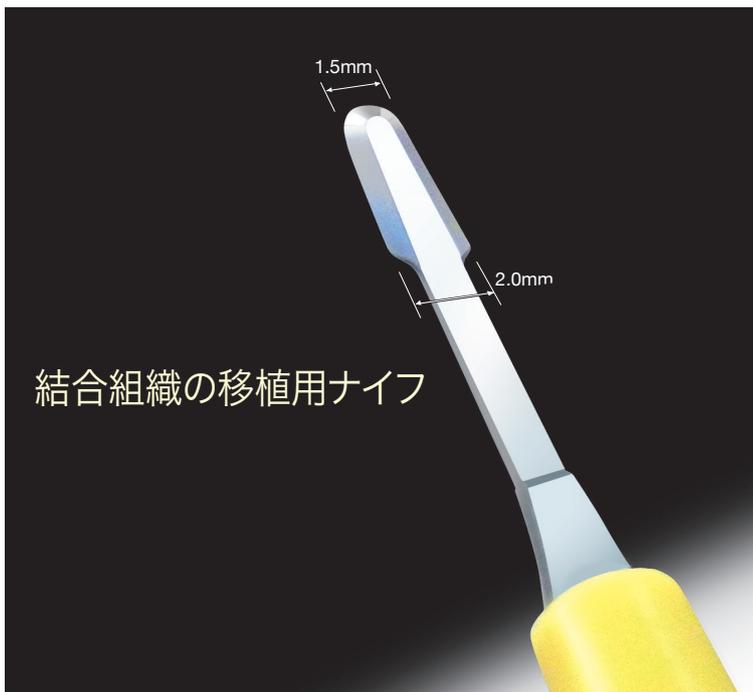


エステティックナイフは結合組織移植術などの歯周形成外科用に適した形状のナイフです。先端の幅が1.5mm、最大幅2.0mmのテーパ形状のため刃先を繊細に動かすことが可能です。迅速な創治癒と審美的な結果を得るために是非お役立てください。

- 《材 質》
- ・刃 刃物用ステンレス鋼
  - ・ハンドル ポリプロピレンテレフタレート樹脂
- 《仕 様》
- ・ディスポーザブル(単回使用)
  - ・EOG滅菌済み
  - ・GS1-128コード対応・JANコード対応
  - ・5本/箱入



- ・精密な加工技術で、精度が高く、安定した刃先形状
- ・特殊刃先仕上げにより実現した、優れた切れ味

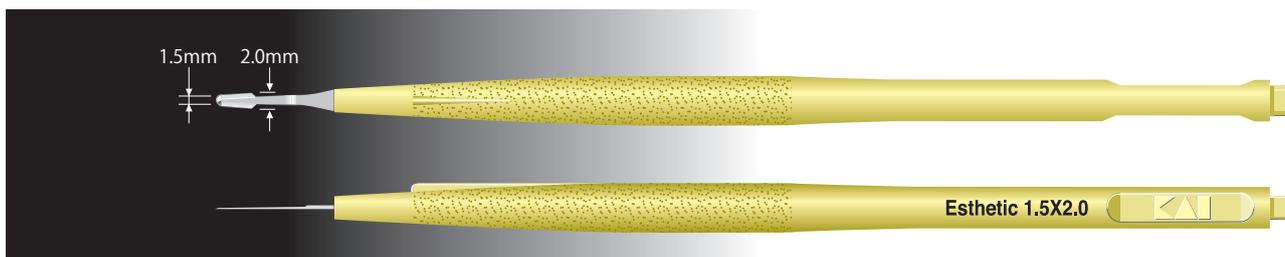




エステティックナイフ EST-15/20 5本入 13,250円(税別) JAN 4560146926405

## KAI コーティング替刃メス DISPOSABLE COATED SURGICAL BLADE

販売名：KAI替刃メス  
医療機器認証番号：219ABBZX00078000

- 《材 質》
- ・刃物用ステンレス鋼
- 《仕 様》
- ・ディスポーザブル(単回使用)
  - ・γ線滅菌済み
  - ・GS1-128コード対応
  - ・100枚/箱入(20枚×5箱)、(最小販売単位20枚入/箱)
  - ・10番台替刃の適合ハンドル:M-3,P-3

低摩擦コーティングにより切れ味が向上し、脂肪の付着が低減されることで、優れた切れ味が持続します。

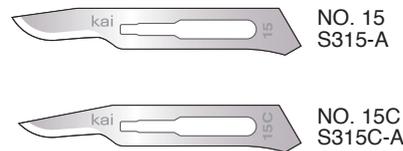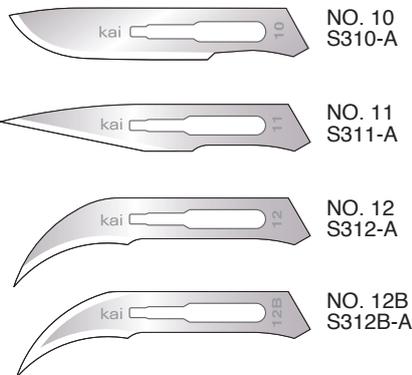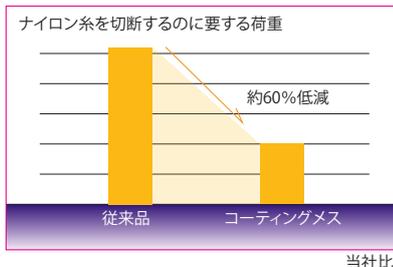

仕様は変更することがあります